




.....

Ležišča za dnevne bolnice



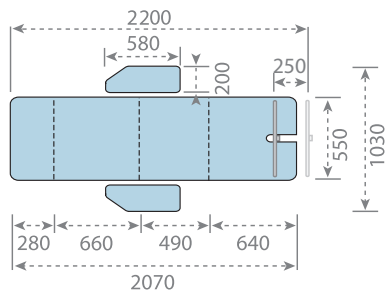

TERAPEVTSKI STOL




ZeroG exclusive



Model: TCZ-EX

Naj **ČAS** med dolgotrajnimi terapijami **MINEVA HITRO** in v **popolnem udobju**.

Terapevtske stole ZeroG odlikujejo izjemno **mehka blazina**, ki preprečuje potenje in pregrevanje, **nastavljivi nasloni za roke** in glavo ter **položaj ZeroG**, pri katerem se teža telesa med dolgotrajnim ležanjem enakomerno porazdeli po ležalni površini kar razbremeni telo in sklepe.

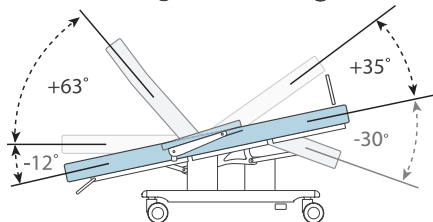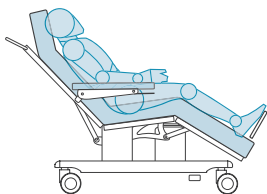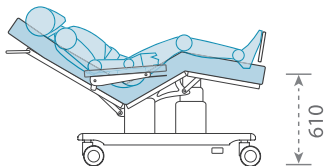


POLOŽAJI



ZeroG položaj omogoča, da se teža telesa enakomerno porazdeli po ležišču



KONFIGURIRAJ

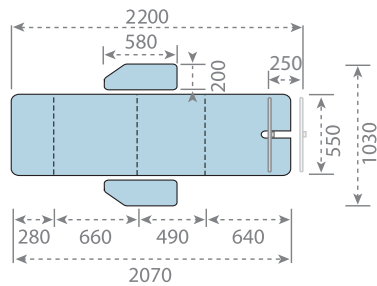


TERAPEVTSKI STOL

ZeroG luxury



Model: TCZ-LUX

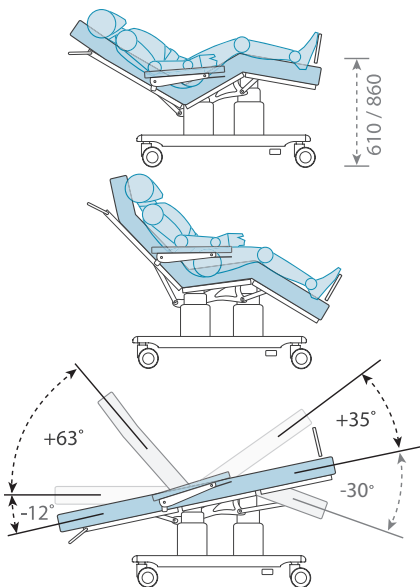

»Ročno stikalo je enostavno za upravljanje, tudi slike za ponazoritev funkcij so jasne in razumljive. Ko sem stol nastavila v položaj ZeroG, se preostanek terapije nisem več premaknila. Zaradi izjemno mehke, udobne blazine je terapija minila mirno in brez bolečin v hrbtu. Imela sem občutek, kot bi sedela na mehkem oblaku.«

(Maja, pacientka na oddelku onkologije)

»Terapevtski stol ZeroG je luksuz tako za paciente, saj ga samostojno nastavijo v zelen položaj in udobno počivajo, kot tudi za nas, medicinsko osebje, saj s prilagajanjem višine stola skrbimo za svoj hrbet.«

(Mojca, medicinska sestra na oddelku revmatologije)



prevleka PVC za nožni del z naslonom za noge (opcijsko)

nastavljiv naslon za noge (opcijsko)

izjemno mehko oblažjenje za popolno udobje (14 cm)

enostavno nastavljivi nasloni za roke

stojalo za infuzijo (opcijsko)

ročno nastavljivo vzglavje

ročaj za vodenje

nosilec za rolo papir (opcijsko)

nosilec stojala za infuzijo na levi ali desni strani (opcijsko)

električno nastavljanje višine in položajev stola

antistatična kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 100 mm) (opcijsko)

letev (opcijsko)




KONFIGURIRAJ

Oprema in dodatki


serijsko ☒ opcijsko ☐

	TCZ-EX	TCZ-LUX
višina stola z oblazinjenjem	61 cm	61-86 cm
višina stola brez oblazinjenja	47 cm	47-72 cm
varna delovna obremenitev	250 kg	250 kg
ročaji za vodenje	☒	☒
nosilec za rolo papir – NZP1-Z	☐	☐
nastavljiv naslon za noge – FR-Z	☐	☐
blazinicca za naslon za noge – BZN1-Z	☐	☐
nosilec stojala za infuzijo, levi – SIFH1-Z-L	☐	☐
nosilec stojala za infuzijo, desni – SIFH1-Z-R	☐	☐
stojalo za infuzijo – SIF1-Z	☐	☐
letev ob sedalnem delu (par) – LE1-Z	☐	☐
kovinska zaščita naslonov za roke (par) – HRP-Z	☐	☐
prevleka PVC za nožni del – PVC1-Z	☐	☐
prevleka PVC za nožni del z naslonom za noge – PVC1-FR-Z	☐	☐
prevleka PVC za naslon za roke – PVC3-Z	☐	☐
kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 100 mm) – SER-CK1-Z	☒	☒
antistatična kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 100 mm) – AC1-CK-Z	☐	☐
velika antistatična kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 125 mm) – AC2-CK-Z	☐	☐
oblazinjenje za intenzivno uporabo - dark sky blue – (HPU-Z)	☐	☐
konektor za izenačitev potencialov – PPEQ	☐	☐
akumulator – BB-Z	☐	☐

Barvna karta PU

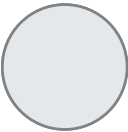

231 light sky gray
standardno

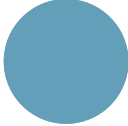

132 sky blue
standardno



133 dark sky blue
standardno ali oblazinjenje za intenzivno uporabo (HPU-Z)



Udobje


Mehka blazina in nastavitev terapevtskega stola v **položaj ZeroG** skrbita za prvovrstno udobje pacientov med dolgotrajnimi terapijami. Blazina je narejena iz **vrhunske pene**, ki nudi **popolno podporo telesu** preko celotne ležalne površine ter **preprečuje pregrevanje in potenje** pacienta. Z enim samim pritiskom na **tipko “oblaček”** na ročnem stikalu si pacient stol nastavi v **položaj ZeroG**, ki še dodatno **razbremeni pritiske na telo in sklepe** med dolgotrajnimi terapijami.

Enostavna namestitvev

Široka paleta enostavnih in pametnih funkcij olajša delo medicinskemu osebju, saj lahko pacient **samostojno nastavlja** stol v zanj najbolj ugoden položaj. Z enim samim pritiskom na tipko na ročnem stikalu, lahko stol nastavite v **položaj ZeroG**, v **sedeč položaj** ali **popolnoma izravna ležišče**. V urgentnih primerih stol omogoča tudi hitro postavitvev v položaj **Trendelenburg**. Za večje udobje med terapijami poskrbi **prilagodljiv naslon za glavo** in **nasloni za roke**, ki si jih pacient enostavno prilagodi s pritiskom na ročico. Stol lahko dodatno opremite z **naslonom za noge**, ki nudi oporo pacientu in sprostitev v primeru krčev. Nastavi ga lahko povsem samostojno s pritiskom na gumb.

Preprosto čiščenje in vzdrževanje

Terapevtski stol ZeroG zaradi **majhnega tlorisa** zavzame zelo malo prostora v ambulantni. Površina blazine je gladka in brez pregibov, zato jo lahko bolje in hitreje očistite. Izdelana je iz tankega, **trpežnega materiala PU**, ki je odporen na kri, urin, olja, maščobe in dezinfekcijska sredstva za **lažje zagotavljanje ustrezne higiene**.

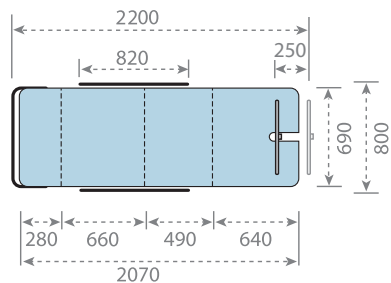

DAY HOSPITAL CHAIR ZeroG




Model: DHCZ


Day hospital chair ZeroG je odgovor na najnovejše trende v medicini saj **obravnave v dnevnih bolnicah** zahtevajo večjo učinkovitost in hkrati brezhibno obravnavo pacientov.

Z inovativnimi rešitvami, ki omogočajo **enostavno in varno vožnjo** ter izboljšajo **počitek in okrevanje po operaciji**, lahko stol DHCZ popolnoma nadomesti tako **TRANSPORTNI VOZIČEK - STRETCHER** kot tudi električno **BOLNIŠKO POSTELJO**.

Stol je namenjen **pripravi pacientov** na kirurške posege, njihovemu **prevozu** in varnemu ter udobnemu **okrevanju** po operaciji.

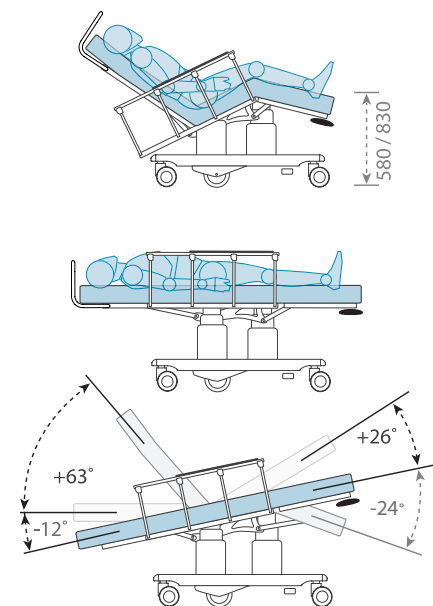

8

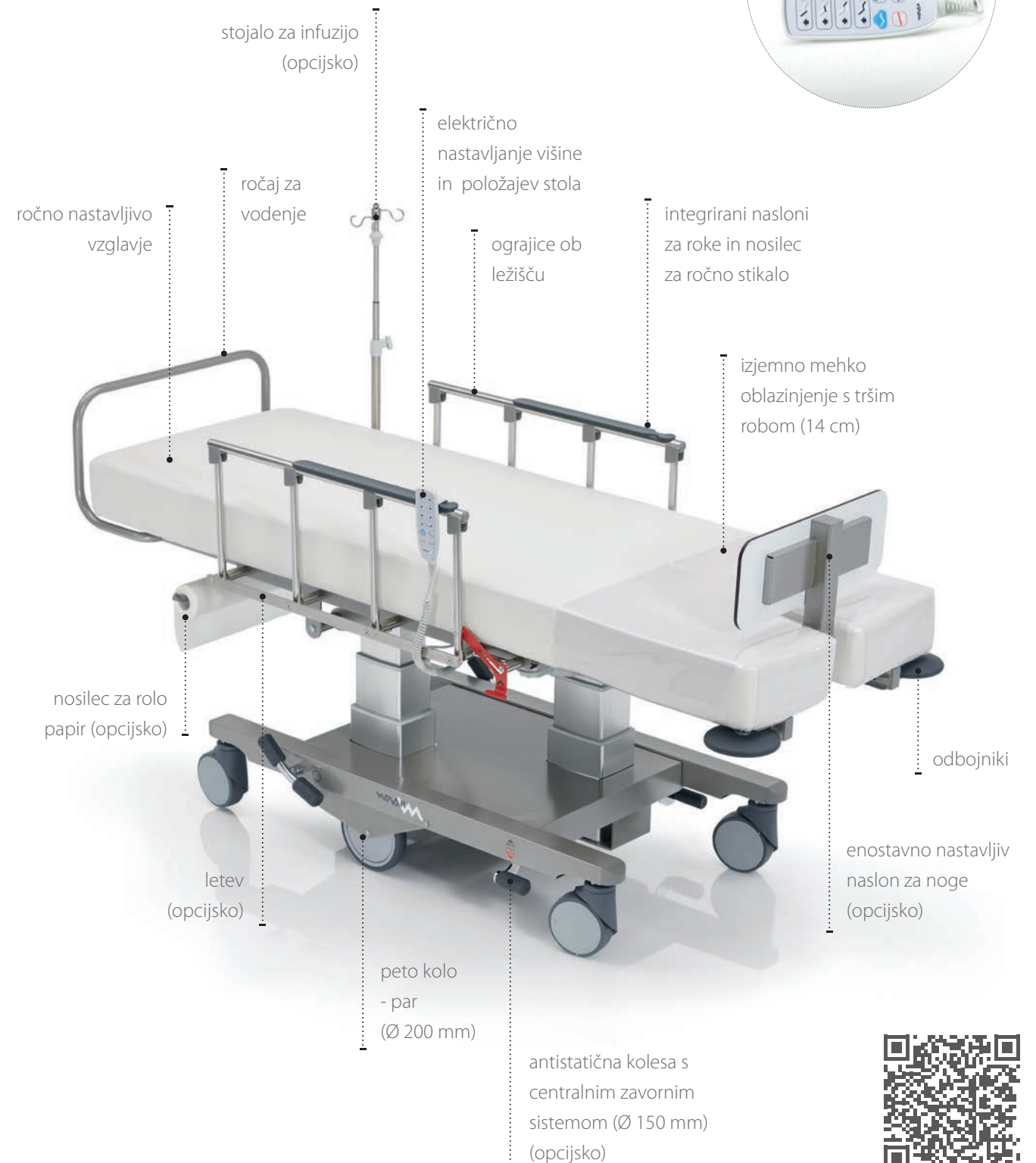

9




KONFIGURIRAJ

Oprema in dodatki


serijsko ☒ opcijsko ☐

	DHCZ
višina stola z oblazinjenjem	58 - 83 cm
višina stola brez oblazinjenja	44 - 69 cm
varna delovna obremenitev	250 kg
ročaji za vodenje	☒
odbojniki	☒
ograjice ob ležišču	☒
integrirani nasloni za roke in nosilec za ročno stikalo	☒
nosilec za rolo papir – NZP2-Z	☐
nastavljiv naslon za noge – FR-Z	☐
nosilec stojala za infuzijo, desni – SIFH2-Z-R	☐
nosilec stojala za infuzijo, levi – SIFH2-Z-L	☐
stojalo za infuzijo – SIF1-Z	☐
letev ob sedalnem delu (par) – LE2-Z	☐
črno, antistatično oblazinjenje – APU-Z	☐
oblazinjenje za intenzivno uporabo - dark sky blue – HPU-Z	☐
prevleka PVC za nožni del – PVC2-Z	☐
prevleka PVC za nožni del z naslonom za noge – PVC2-FR-Z	☐
peto kolo (par) (Ø 200 mm)	☒
kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 150 mm) – SER-CK2-Z	☒
antistatična kolesa s centralnim zavornim sistemom (Ø 150 mm) (4 kos) – AC3-CK-Z	☐
baterija – BB-Z	☐
konektor za izenačitev potencialov – PPEQ	☐
nosilec za kisikovo jeklenko (45 cm) – O2-Z	☐
podaljšana ograjica ob ležišču – OOLE-Z	☐


Barvna karta PU

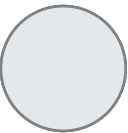- 

231 light sky gray

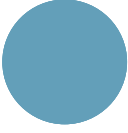standardno
- 

132 sky blue

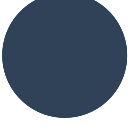standardno
- 

133 dark sky blue

standardno ali oblazinjenje za intenzivno uporabo (HPU-Z)
- 

PU black

črno, antistatično oblazinjenje (APU-Z)



Enostaven dostop in priprava

Višina novega stola ZeroG je električno nastavljiva z ročnim stikalom. Ena njegovih ključnih prednosti je **nizek položaj**, da se pacient lažje namesti na ležišče. **Integrirani nasloni za roke** na ograjicah omogočajo medicinskemu osebju lažjo in hitrejšo pripravo pacienta na operacijo. Stol je mogoče nastaviti v **popolnoma izravnani položaj**, ki je idealen za premikanje pacientov s stola ZeroG na operacijsko mizo in obratno. **Stojalo za infuzijo**, ki ga lahko pritrdite na levo ali desno stran stola, je vedno v **vertikalnem položaju** ne glede na položaj stola.

Izjemna vožnja in okretnost

Enostavno zasnovane in pametne funkcije stola olajšajo njegovo potiskanje, obračanje in vožnjo. Day hospital chair ZeroG ima **kolesa s centralnim zavornim sistemom**, ki so nastavljiva z vseh strani. Da je upravljanje s stolom, vožnja po bolnišničnih hodnikih in obračanje na mestu še lažje, ima serijsko dodani tudi **dve peti kolesi**. Na vzglavju stola so na optimalni višini nameščeni **ročaji za vodenje**. **Odbojniki** na vznožju stola pa med vožnjo in menevriranjem ščitijo stol in okolico pred poškodbami.

Udobno in varno okrevanje

Preprosto nastavljanje stola ZeroG omogoča kirurgom, da paciente po operaciji varno premestijo na stol DHCZ in jim omogočijo **optimalen položaj za okrevanje**. Z dvigom stabilnih in trdnih **ograjic (patent EP št. 3496694 in US št. 11110019)** na obeh straneh stola poskrbijo, da so pacienti med vožnjo in počitkom varni pred padci. **Izjemno mehko oblazinjenje** in **enostavno nastavljanje stola** poskrbijo za prvovrstno udobje pacientov med počitkom po posegu. Pacient si lahko **samostojno prilagodi** stol v zanj najbolj ugoden položaj. Z enim samim pritiskom na **tipko “oblaček”** na ročnem stikalu lahko stol nastavi v **položaj ZeroG**, najbolj udoben položaj za počivanje. Ročno stikalo lahko pacienti in medicinsko osebje vedno varno odložijo na **nosilec za ročno stikalo**, ki je skupaj z nasloni za roke integriran na ograjicah ob ležišču.



.....

Novak M d.o.o.

Pod kostanji 7
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com

