




.....

Fauteuils d'hôpital de jour

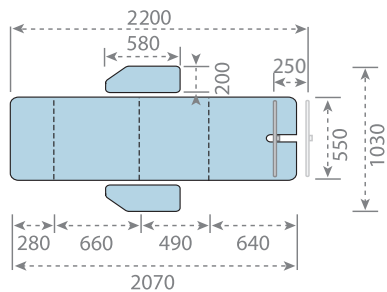

LE FAUTEUIL THERAPEUTIQUE




ZeroG exclusive



Model: TCZ-EX

Rendez les thérapies de longue durée **PLUS AGRÉABLES** grâce à un **confort optimal**.


Les fauteuils de thérapie ZeroG se distinguent par un **matelas moelleux** limitant la transpiration et la surchauffe, un **appui-tête** et des **accoudoirs réglables**, ainsi que par la **POSITION ZERO GRAVITY**, qui libère le corps des contraintes liées à la gravité en répartissant le poids de façon homogène.

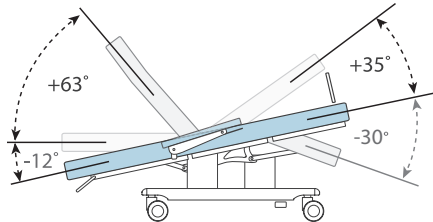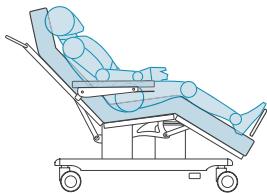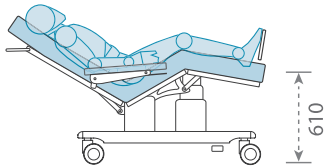

POSITIONS



CONFIGURER

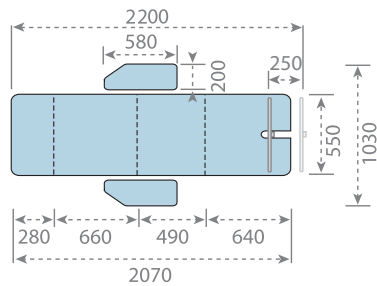

LE FAUTEUIL THERAPEUTIQUE


ZeroG luxury



Model: TCZ-LUX

»La commande manuelle est facile à utiliser. Ayant installé le fauteuil en position Zero G, je n'ai plus eu besoin de le bouger pendant tout le reste du traitement. Grâce à la souplesse et au confort exceptionnels du revêtement, mon traitement s'est passé tranquillement, sans aucun mal au dos. J'avais l'impression d'être assis sur un nuage.«
(Maja, patient en service de dialyse)

»Le fauteuil thérapeutique ZeroG est un luxe aussi bien pour les patients qui peuvent le régler selon leurs besoins, que pour les membres du personnel médical qui en adaptant sa hauteur, prennent soin de leur dos.«
(infirmière Mojca, service de rhumatologie)

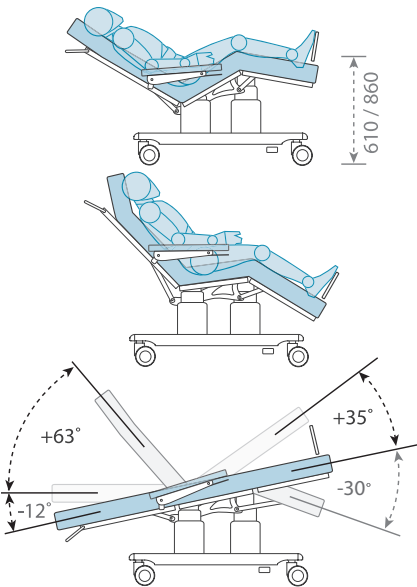

POSITIONS



CONFIGURER

Equipements et accessoires

standard ● optionnel ○

	TCZ-EX	TCZ-LUX
hauteur du fauteuil avec revêtement	61 cm	61-86 cm
hauteur du fauteuil sans revêtement	47 cm	47-72 cm
charge maximale d'utilisation	250 kg	250 kg
poignée de poussée	●	●
porte-rouleau de papier – NZP1-Z	○	○
repose-pied réglable – FR-Z	○	○
coussin pour repose-pied – BZN1-Z	○	○
support à perfusion, gauche – SIFH1-Z-L	○	○
support à perfusion, droite – SIFH1-Z-R	○	○
pied à perfusion – SIF1-Z	○	○
rail à la partie assise (la paire) – LE1-Z	○	○
protection latérale des accoudoirs (la paire) – HRP-Z	○	○
couverture PVC pour la partie consacrée aux jambes – PVC1-Z	○	○
couverture PVC pour la partie consacrée aux jambes avec repose-pied – PVC1-FR-Z	○	○
revêtement en PVC pour l'accoudoir – PVC3-Z	○	○
roues avec système de freinage centralisé (Ø 100 mm) – SER-CK1-Z	●	●
roues antistatiques avec système de freinage centralisé (Ø 100 mm) – AC1-CK-Z	○	○
grandes roues antistatiques avec système de freinage centralisé (Ø 125 mm) – AC2-CK-Z	○	○
revêtement pour un usage intensive - dark sky blue – HPU-Z	○	○
connecteur électrique pour équilibrage de tension – PPEQ	○	○
batterie de sécurité – BB-Z	○	○

Gamme de coloris PU

- 231 light sky gray
standard
- 132 sky blue
standard
- 133 dark sky blue
standard ou revêtement pour un usage intensive (HPU-Z) en supplément



Confort


La **souplesse du revêtement** et le réglage du fauteuil en **position Zero Gravity** offrent un confort de premier ordre aux patients pendant les traitements thérapeutiques de longue durée. Le revêtement est réalisé dans une **mousse de qualité supérieure** qui offre au corps un **soutien parfait sur l'ensemble du fauteuil** et empêche que le patient **n'ait trop chaud et transpire**. Une seule pression sur **le bouton "le nuage"** de la commande manuelle permet d'installer le fauteuil en **position Zero G**, laquelle soulage encore davantage **les sensations de pression** sur le corps et les articulations pendant les thérapies de longue durée.

Simplicité des réglages

Un grand nombre de fonctions simples et intelligentes facilite le travail du personnel médical. Le patient peut en effet **régler** le fauteuil dans la position qu'il désire **de façon autonome**. Il peut le placer en **position Zero G**, en position **assise** ou en **position couchée** d'une seule pression sur le bouton de la commande manuelle. Dans les situations d'urgence, le fauteuil peut rapidement être installé en position de **Trendelenburg**. Toutes les parties du fauteuil sont réglables **simultanément**. Pour un confort encore accru, le patient peut facilement régler les **accoudoirs** et **l'appui-tête**. Le fauteuil peut être équipé d'un **repose-pieds** qui offre un soutien au patient en cas de crampes. En appuyant puis en relâchant le bouton intégré, le patient peut régler rapidement le repose-pieds de manière autonome.

Facilite d'entretien et de nettoyage

En raison de ses **dimensions réduites**, le fauteuil prend peu de place. Son revêtement offre une surface parfaitement lisse, et permet un nettoyage rapide et efficace. Réalisé dans un **matériau PU** fin et **résistant** au sang, à l'urine, à l'huile, aux graisses et aux produits désinfectants, il **garantit une hygiène parfaite**.

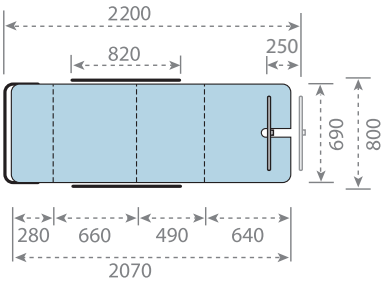

DAY HOSPITAL CHAIR ZeroG





Model: DHCZ

Le **Day hospital chair ZeroG** a été conçu pour répondre aux besoins de **la chirurgie ambulatoire** et de **la récupération post-opératoire**.

En simplifiant, en sécurisant le transport et **en facilitant la récupération** post-opératoire, le nouveau fauteuil d'hôpital de jour ZeroG sert à la fois de **BRANCARD** et de **LIT D'HÔPITAL**.

Il a été développé pour **préparer** les patients à l'intervention chirurgicale, permettre leur **transport**, et rendre leur **repos sûr et confortable après l'intervention**.

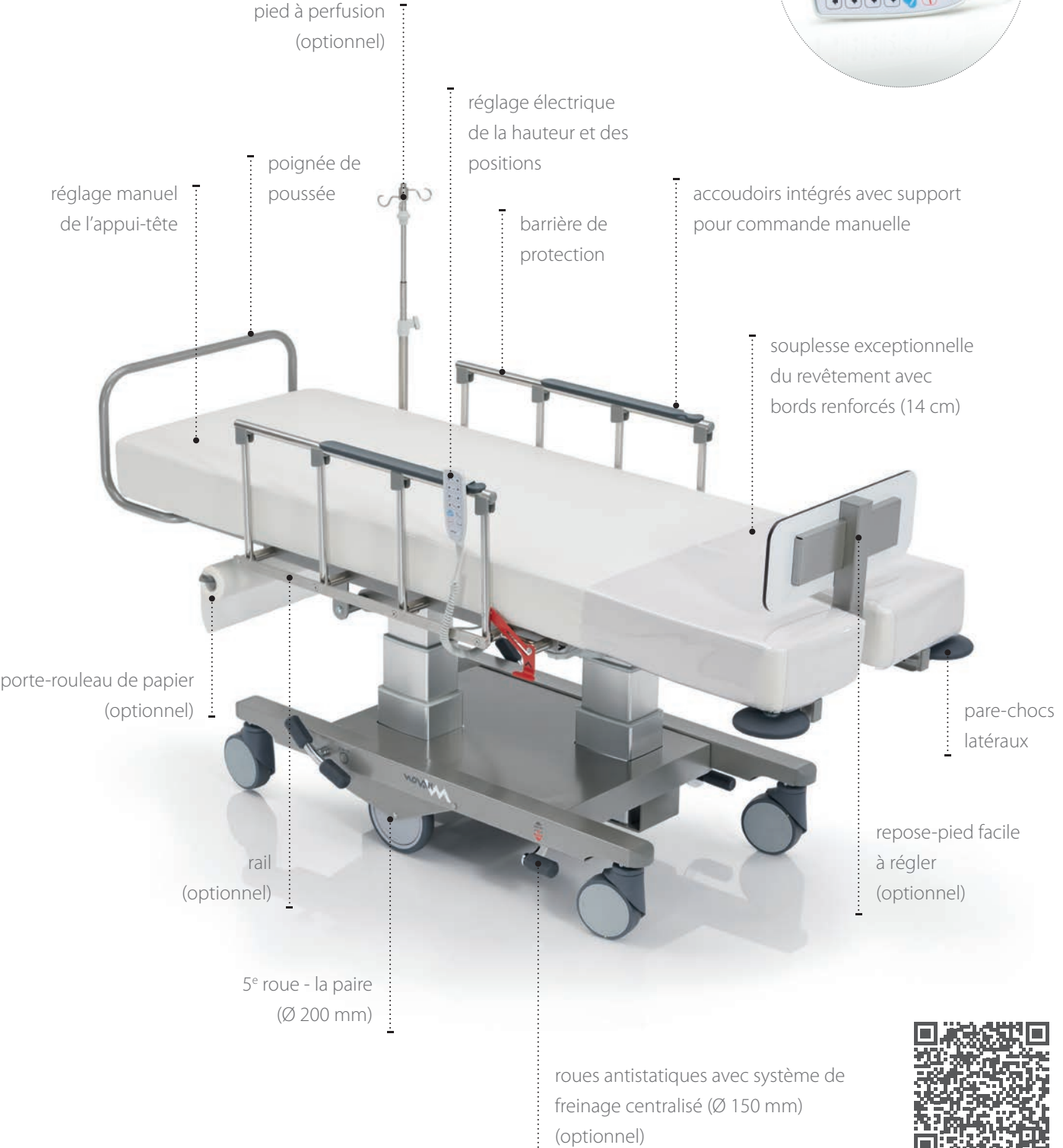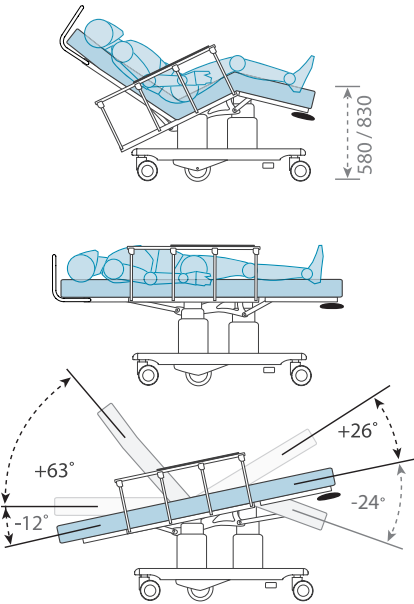


Equipements et accessoires


standard ● optionnel ○

	DHCZ
hauteur du fauteuil avec revêtement	58 - 83 cm
hauteur du fauteuil sans revêtement	44 - 69 cm
charge maximale d'utilisation	250 kg
poignée de poussée	●
pare-chocs latéraux	●
barrières de protection	●
accoudoirs intégrés avec support pour commande manuelle	●
porte-rouleau de papier – NZP2-Z	○
repose-pied réglable – FR-Z	○
support à perfusion, droite – SIFH2-Z-R	○
support à perfusion, gauche – SIFH2-Z-L	○
pied à perfusion – SIF1-Z	○
rail à la partie assise (la paire) – LE2-Z	○
revêtement antistatique noir – APU-Z	○
revêtement pour un usage intensive - dark sky blue – HPU-Z	○
couverture PVC pour la partie consacrée aux jambes – PVC2-Z	○
couverture PVC pour la partie consacrée aux jambes avec repose-pied – PVC2-FR-Z	○
5 ^e roue (la paire) (Ø 200 mm)	●
roues avec système de freinage centralisé (Ø 150 mm) – SER-CK2-Z	●
roues antistatiques avec système de freinage centralisé (Ø 150 mm) (4 pcs) – AC3-CK-Z	○
batterie de sécurité – BB-Z	○
connecteur électrique pour équilibrage de tension – PPEQ	○
support de bouteille à oxygène (45 cm) – O2-Z	○
barrières de protection allongées – OOLE-Z	○

Gamme de coloris PU

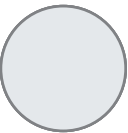

231 light sky gray
standard

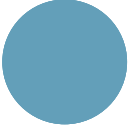

132 sky blue
standard



133 dark sky blue
standard ou revêtement pour un usage intensive (HPU-Z)



PU black
revêtement antistatique noir (APU-Z)



Un accès et une préparation facilités

La hauteur du fauteuil d’hôpital de jour ZeroG est réglable électriquement à l’aide d’une commande manuelle. L’un des principaux avantages du fauteuil tient au fait que **sa position assise est basse**, ce qui facilite l’installation du patient. **Les accoudoirs intégrés** sur des **rails de sécurité** (Brevet EP N°3496694 et US N°11110019) permettent au personnel médical de préparer le patient à l’intervention. Le fauteuil peut être installé **en position horizontale**. Il convient donc parfaitement pour transférer le patient directement sur la table d’opération et vice versa. **Le support à perfusion** peut être fixé soit à gauche soit à droite du fauteuil. Sa position reste **verticale** quelle que soit la position du fauteuil.

Une mobilité et une agilité exceptionnelles

Une large gamme de fonctionnalités simples et intelligentes facilite la dirigeabilité et la maniabilité du fauteuil. Le Day hospital chair ZeroG est équipé de **roulettes avec système de freinage centralisé** réglable de chaque côté. Il dispose également **d’une cinquième roue** (la paire) qui facilite la conduite et la manœuvrabilité dans les couloirs et lui permet de tourner sur lui-même. **Des poignées de poussée** fixées au niveau de l’appui-tête assurent une excellente prise en main pendant le transport, et les **pare-chocs** situés aux angles, au niveau des pieds, protègent le fauteuil et les environs de tous dommages éventuels.

Une récupération confortable en toute sécurité

Des réglages simples permettent aux chirurgiens d’adapter le Day hospital chair ZeroG en toute sécurité pour y transférer leurs patients après l’intervention et les installer **dans la meilleure position pour récupérer**. **Des barrières de protection** fermes et robustes de chaque côté du fauteuil préviennent tout risque de chute. Pendant la récupération post-opératoire, **la souplesse extrême du rembourrage et la facilité des réglages** garantissent un confort de première classe pour les patients qui peuvent **eux-mêmes** ajuster le fauteuil dans la position qu’ils jugent la plus adaptée. En appuyant sur le bouton **“cloud”** de **la commande manuelle**, ils peuvent installer le fauteuil d’hôpital de jour en **position ZeroG**, la position la plus confortable pour le repos. A tout moment pendant la récupération, la commande peut être placée sur **le support** qui est intégré le long des accoudoirs sur les barrières de protection.



.....

Novak M d.o.o.

Pod kostanji 7
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com

