




.....

Poltrone per day hospital



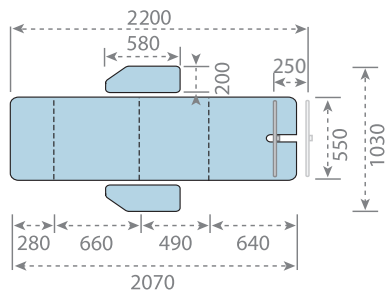




POLTRONA TERAPEUTICA ZeroG exclusive



Modello: TCZ-EX

Comfort impareggiabile che farà sembrare **PIÙ BREVI** le terapie lunghe.


Le poltrone terapeutiche ZeroG si distinguono per le loro caratteristiche uniche: **morbido materasso** che impedisce la sudorazione e il surriscaldamento, **poggiatesta** e **appoggiabraccio regolabili** e **POSIZIONE ZERO GRAVITY**, che allevia la pressione della gravità dal corpo distribuendo il peso corporeo in modo uniforme.

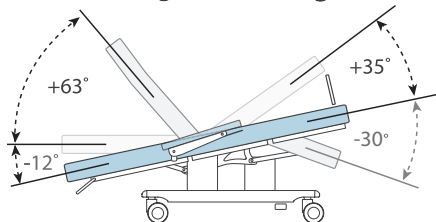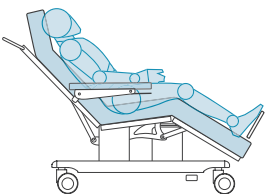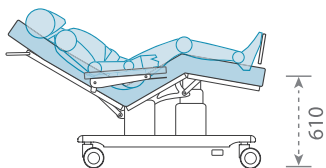

POSIZIONI




CONFIGURATE

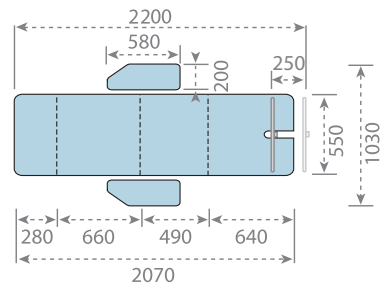

POLTRONA TERAPEUTICA ZeroG luxury



Modello: TCZ-LUX

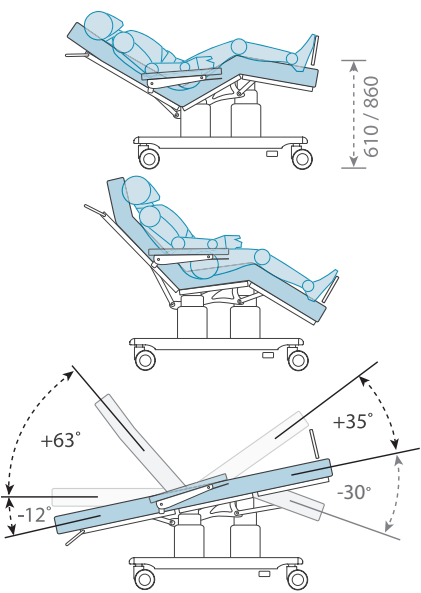

»L'interruttore manuale, facile da usare, con immagini chiare e semplici che mostrano le diverse funzioni. Dopo averla regolata nella posizione ZeroG, non ho dovuto più sposarmi durante tutta la durata della terapia. Grazie alla imbottitura estremamente morbida e comoda, la terapia si è svolta in modo tranquillo e senza dolori alla schiena. Ho avuto la sensazione di sedere su una morbida nuvola.»
(Maja, paziente del reparto di dialisi)

»La Poltrona terapeutica ZeroG è un vero lusso per i pazienti, visto che si può regolarla in qualsiasi posizione, ma lo è anche per il personale medico, visto che la regolazione ci permette di prenderci cura anche della nostra schiena.»
(infermiera Mojca, reparto di reumatologia)




CONFIGURATE

Allestimento ed accessori

di serie ● opzionale ○

	TCZ-EX	TCZ-LUX
altezza della poltrona con imbottitura	61 cm	61-86 cm
altezza della poltrona senza imbottitura	47 cm	47-72 cm
carico di lavoro sicuro	250 kg	250 kg
maniglie per la conduzione	●	●
portarotolo – NZP1-Z	○	○
poggiapiedi regolabile – FR-Z	○	○
cuscinio poggiapiedi – BZN1-Z	○	○
supporto per asta porta flebo, sinistra – SIFH1-Z-L	○	○
supporto per asta porta flebo, destra – SIFH1-Z-R	○	○
asta porta flebo – SIF1-Z	○	○
barra porta accessori (paio) – LE1-Z	○	○
protezione metallica dei appoggiabraccia (paio) – HRP-Z	○	○
PVC rivestimento del sezione gambe – PVC1-Z	○	○
PVC rivestimento del sezione gambe con poggiapiedi – PVC1-FR-Z	○	○
PVC rivestimento del appoggiabraccio – PVC3-Z	○	○
ruote con sistema di frenaggio centrale (Ø 100 mm) – SER-CK1-Z	●	●
ruote antistatiche con sistema di frenaggio centrale (Ø 100 mm) – AC1-CK-Z	○	○
grandi ruote antistatiche con sistema di frenaggio centrale (Ø 125 mm) – AC2-CK-Z	○	○
imbottitura per usi intensi - dark sky blue – HPU-Z	○	○
connettore a spina per l’equalizzazione del potenziale – PPEQ	○	○
batteria – BB-Z	○	○

Carta colori PU

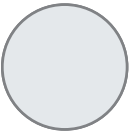

231 light sky gray
di serie



132 sky blue
di serie



133 dark sky blue
di serie o imbottitura per usi intensi (HPU-Z) con costo aggiuntivo



Comfort


La **imbottitura morbida** e la regolazione della poltrona terapeutica nella **posizione Zero Gravity**, durante le terapie prolungate, si prendono cura in primo luogo del comfort del paziente. Il materasso è prodotto da **schiuma di elevata qualità**, che offre **al corpo un sostegno totale** per tutta la superficie, su cui si è distesi, e **limita la sudorazione e il riscaldamento eccessivo** del paziente. Basta premere il bottone **“nuvola”** sull’interruttore manuale e il paziente può posizionare la sedia **nella posizione Zero G**, che scarica ulteriormente **la pressione dalle articolazioni e dal corpo** durante le terapie prolungate.

Posizionamento facile

Grazie alla vasta scelta di funzioni intelligenti facilita il lavoro al personale medico, visto che il paziente **può regolarsi la sedia in autonomia**, nella posizione per lui più comoda. Basta che il paziente preme un unico bottone sull’interruttore manuale e la poltrona si posiziona su **Zero G**, nella posizione **da seduto oppure da disteso**. Per casi d’urgenza la poltrona permette anche la regolazione rapida nella posizione **Trendelenburg**. Tutte le parti della poltrona possono essere regolate contemporaneamente. Per un comfort ancora maggiore, il paziente può regolare facilmente gli **appoggiabraccia** e il **poggiatesta**. È inoltre possibile equipaggiare la poltrona con un **poggiapiedi** che offre supporto al paziente, relax e previene i crampi. Il paziente può impostarlo piena autonomia esercitando una pressione sul pulsante.

Pulizia e manutenzione facili

La Poltrona terapeutica ZeroG occupa pochissimo spazio nell’ambulatorio grazie agli **ingombri ridotti**. La superficie del cuscino è liscia e senza pieghe, per tale motivo si pulisce meglio e con maggiore facilità. Prodotto con materiale **PU robusto e sottile**, è resistente alle macchie di sangue, urine, olio, grassi e disinfettanti, **per garantirvi un’igiene migliore**.

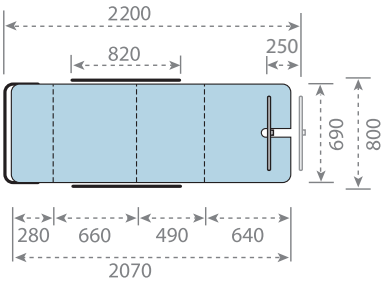

DAY HOSPITAL CHAIR ZeroG




Modello: DHCZ


Day hospital chair ZeroG è stata sviluppata in risposta alle ultime tendenze nei servizi di **ospedali diurni e di riabilitazione da intervento chirurgico**.

Le soluzioni innovative la rendono facile e sicura per gli **spostamenti** e più adatta per il **riposo postoperatorio**. La nuova poltrona ZeroG può sostituire completamente sia la **BARELLA** che il **LETTO OSPEDALIERO** motorizzato.

La poltrona è destinata alla **preparazione** dei pazienti per l'intervento chirurgico, al loro **trasporto** e ad una **riabilitazione** sicura e confortevole dopo l'intervento.

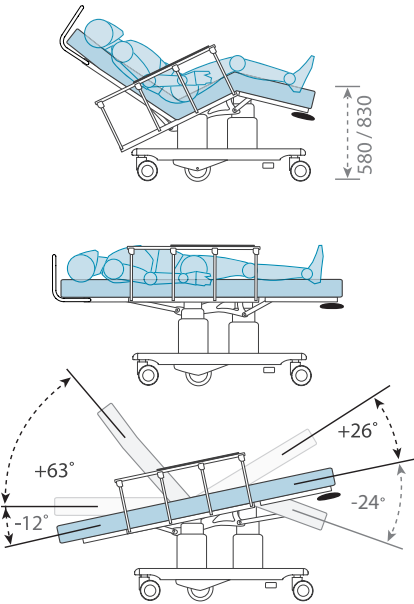

POSIZIONI

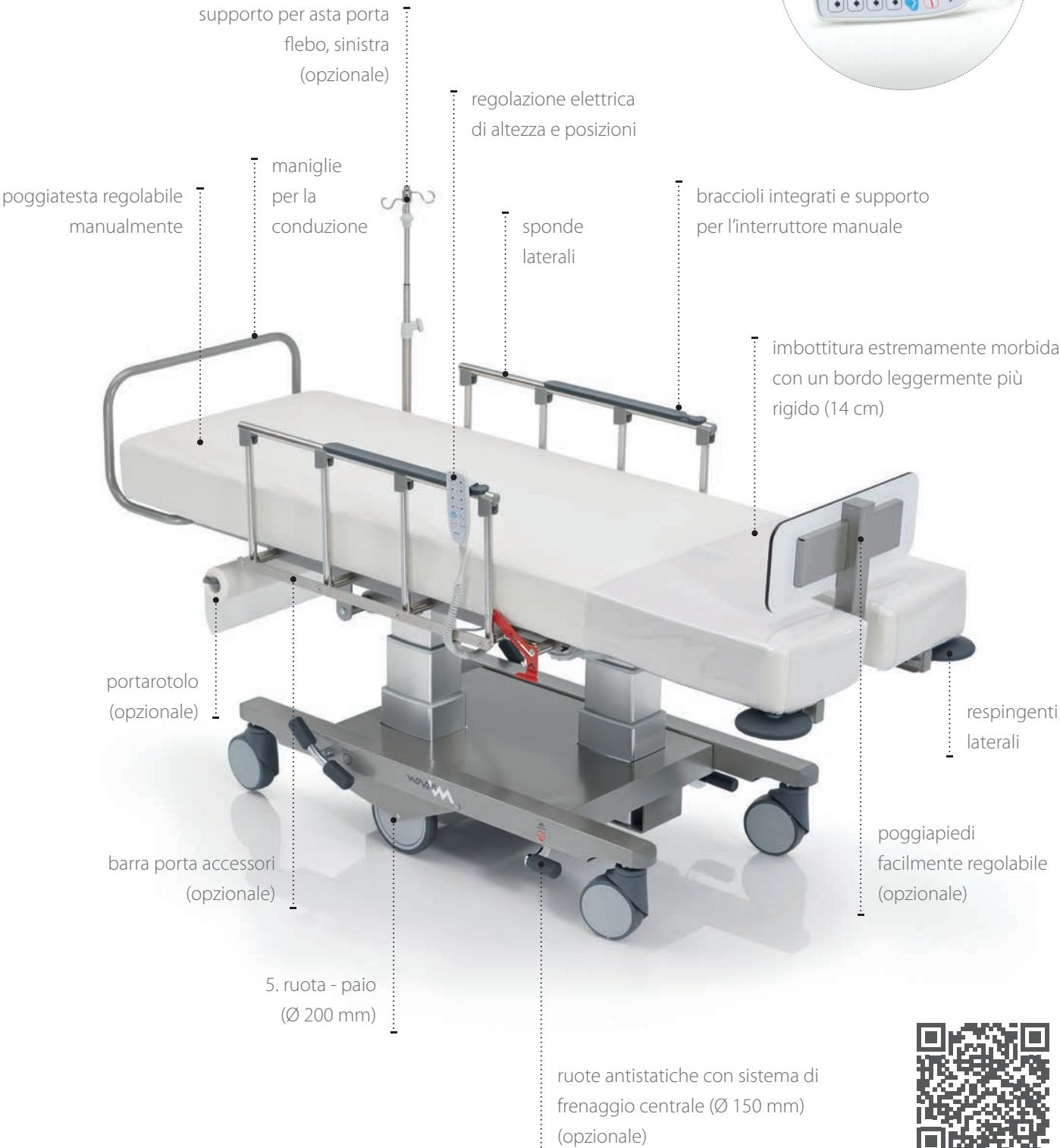

CONFIGURATE

Allestimento ed accessori

di serie ● opzionale ○

	DHCZ
altezza della poltrona con imbottitura	58 - 83 cm
altezza della poltrona senza imbottitura	44 - 69 cm
carico di lavoro sicuro	250 kg
maniglie per la conduzione	●
respingenti laterali	●
sponde laterali	●
braccioli integrati e supporto per l'interruttore manuale	●
portarotolo – NZP2-Z	○
poggiapiedi regolabile – FR-Z	○
supporto per asta porta flebo, destra – SIFH2-Z-R	○
supporto per asta porta flebo, sinistra – SIFH2-Z-L	○
asta porta flebo – SIF1-Z	○
barra porta accessori (paio) – LE2-Z	○
imbottitura nera, antistatica – APU-Z	○
imbottitura per usi intensi - dark sky blue – HPU-Z	○
PVC rivestimento del sezione gambe – PVC2-Z	○
PVC rivestimento del sezione gambe con poggiapiedi – PVC2-FR-Z	○
quinta ruota (paio) (Ø 200 mm)	●
ruote con sistema di frenaggio centrale (Ø 150 mm) – SER-CK2-Z	●
ruote antistatiche con sistema di frenaggio centrale (Ø 150 mm) (4 pcs) – AC3-CK-Z	○
batteria – BB-Z	○
connettore a spina per l'equalizzazione del potenziale – PPEQ	○
supporto per bombola di ossigeno (45 cm) – O2-Z	○
sponde laterali prolungate – OOLE-Z	○

Carta colori PU

- 231 light sky gray

di serie
- 132 sky blue

di serie
- 133 dark sky blue

di serie o imbottitura per usi intensivi (HPU-Z)
- PU black

imbottitura nera, antistatica (APU-Z)



Facile accesso e preparazione

L'altezza della nuova poltrona ZeroG è regolabile elettricamente con un interruttore manuale. Uno dei suoi principali vantaggi è la **posizione bassa della seduta**, in modo che il paziente possa sedersi e alzarsi autonomamente. I **braccioli integrati** sulle **sponde laterali** (Brevetto EP n. 3496694 e US n. 11110019) permettono al personale medico di preparare i pazienti più rapidamente per l'intervento. La poltrona può essere impostato in una **posizione perfettamente piana**, ideale per spostare i pazienti dallo ZeroG a qualsiasi tavolo operatorio e viceversa. **L'asta porta flebo** che può essere posizionata sul lato sinistro o destro della poltrona è sempre in **posizione verticale**, indipendentemente dalla posizione della poltrona.

Grande mobilità e agilità

Le funzioni intelligenti della poltrona progettate in modo semplice facilitano le operazioni di spinta, rotazione e guida. Day hospital chair ZeroG ha sulle **ruote con sistema di frenaggio centrale** che può essere comandato da tutti i lati. Per muovere meglio la poltrona, spingerla attraverso i corridoi dell'ospedale e farla girare su sé stessa, abbiamo aggiunto di **quinta ruota (paio)** oltre alle originali quattro. Per spingere la poltrona dietro la tastiera trovate **le maniglie**, posizionate all'altezza ottimale per un più facile controllo del movimento in qualsiasi situazione, mentre dei **respingenti laterali** in basso proteggono la poltrona e l'area circostante da eventuali danni.

Convalescenza confortevole e sicura

La semplice regolazione della sedia Day hospital chair ZeroG consente ai chirurghi di spostare i pazienti in sicurezza sulla sedia dopo l'intervento chirurgico e di **regolare la loro posizione ottimale per la convalescenza**. Sollevando le **sponde laterali** che sono solide e stabili su entrambi i lati della poltrona si evita che i pazienti possano cadere durante gli spostamenti o il riposo. **L'imbottitura estremamente morbida** e **le impostazioni semplici garantiscono** un comfort di prima classe per i pazienti durante il riposo e dopo l'intervento. Il paziente può **trovare da solo** la posizione che gli si addice di più. Con un solo clic sul **pulsante "nuvola"** dell'interruttore manuale, la sedia può essere impostata sulla **posizione ZeroG**, che è la più confortevole. L'interruttore manuale può sempre essere posizionato in modo sicuro da pazienti e dal personale medico **sulla staffa per l'interruttore manuale**, che, insieme ai braccioli, è integrata nelle spondine sui lati della poltrona.



.....

Novak M d.o.o.

Pod kostanji 7
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com

